

eye
banking
tools



DMEK vacuum donor **punch**
donor **excision** set
slam sutureless amniotic membrane

e. janach®

CORNEA

donorexcisionset
eyebankingtools

setprelievodonatore
strumentieyebanking



**Janach
J3740**

Supporto rotativo per lama, modello M. Campanelli
Blade holder, designed by M. Campanelli M.D.

**Janach
J3716**

Lama prelievo cornea, Ø 16 mm, modello M. Campanelli
Donor Blade, Ø 16 mm, designed by M. Campanelli M.D.

Ø 16

**Janach
J3750**

Fissabulbo/centratore per lama da prelievo (da utilizzare con lama da Ø 16 mm, J3716)
Fixation ring and guide for blade (to be used with Ø 16 mm blade, J3716)



**Janach
J3740**

Supporto rotativo per lama, modello M. Campanelli
Blade holder, designed by M. Campanelli M.D.

**Janach
J3717**

Lama prelievo cornea, Ø 17 mm, modello M. Campanelli
Donor Blade, Ø 17 mm, designed by M. Campanelli M.D.

Ø 17

**Janach
J3750.1**

Fissabulbo/centratore per lama da prelievo (da utilizzare con lama da Ø 17 mm, J3717)
Fixation ring and guide for blade (to be used with Ø 17 mm blade, J3717)




51-905-18

Lama prelievo cornea, Ø 18 mm, monouso (da utilizzare senza supporto)
Donor Blade, Ø 18 mm, disposable (no blade holder required)

Ø 18

**Janach
J3688**

Pinza per prelevamento lenticolo donatore dal liquido di conservazione, con 1x2 denti retti da 0.20 mm
Forceps for picking up donor cornea from flask, 1x2 straight, 0.20 mm teeth

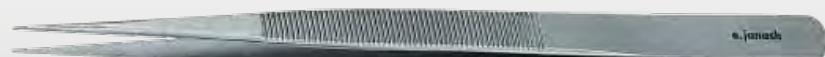

**Janach
J3723**

Lama Ø 23 mm, da utilizzare senza supporti
Blade Ø 23 mm



DMEK punch donatore kit a suzione monouso

vacuum donor punch disposable kit

La procedura DMEK è un nuovo traguardo nella chirurgia lamellare profonda. Grazie alla preziosa collaborazione iniziata con il Dott. R. Fogla, il nostro centro di ricerca ha sviluppato ed introdotto fra i primi un sistema a suzione per questa affascinante procedura.

Un nuovo progetto basato su analogo sistema, nato con la collaborazione tecnico-scientifica della **Banca degli Occhi di Mestre**, ha creato un innovativo donor punch in grado di semplificare la procedura di preparazione del lenticolo all'interno delle Banche degli Occhi.

DMEK is the latest accomplishment in deep lamellar surgery. Thanks to the valuable collaboration started with Dr. R. Fogla, our R & D department has been among the first developers of an innovative suction system for this fascinating procedure.

A new project, based on a similar system, developed with the scientific collaboration of the Mestre Eye Bank, has given birth to a new concept of donor punch with peculiar features that facilitate lenticle preparation in Eye Banks.

JD2890FD.100

eyebanking DMEK punch 100 μ calibrated blade



Nuovo sistema di aspirazione potenziato grazie a un innovativo zoccolo di suzione e nuovo disegno del punzone permette un facile e preciso taglio sotto il controllo visivo del chirurgo.

NEW enhanced donor vacuum trephine. Innovative design allows the surgeon to perform a precise and easy cutting under visual control

DMEK punch con lama $\varnothing$ 10.0 mm, profondità calibrata 100 μ
DMEK punch blade $\varnothing$ 10.0 mm with calibrated depth 100 μ

instruments designed by R. Fogla

J2892E Pinza stripping/peeling DMEK per membrana di Descemet, presa delicata anatomica

DMEK Stripping/peeling forceps for Descemet membrane, delicate anatomically designed tips



La pinza con branche anatomiche afferra al margine la membrana fissata sul supporto a suzione che dolcemente viene scollata sotto un'azione di peeling. Il lenticolo scollato viene poi immerso nella soluzione prima di essere inserito nel paziente. Lo scollamento del margine si ottiene utilizzando l'uncino di clivaggio J2891E

Forceps with tips anatomically designed for the stripping/peeling of the delicate Descemet membrane. The forceps grasp the membrane at the edge and perform the detachment of the Descemet lenticle by means of a peeling action. At this step the membrane is secured to its support by the suction system. Cleavage of the membrane is performed with the Fogla hook J2891E

J2891E Uncino per clivaggio DMEK per membrana di Descemet

DMEK cleavage hook for Descemet membrane



L'uncino di sezione triangolare con apice atraumatico svolge la funzione di clivaggio al margine del lenticolo precedentemente fissato sulla base a suzione. Una volta sollevata la membrana di Descemet, la pinza J2892E completa il peeling della DM.

Delicate blunt hook for Descemet membrane cleavage. The Fogla hook, with atraumatic tips, triangular shaped, performs the cleavage at the edges of the lenticle previously secured to the suction DMEK support. Once the correct thickness of the pure Descemet membrane is achieved, the Janach forceps J2892E performs the detachment by means of the peeling action.



video
www.janach.it

SLAMprocedure sutureless amniotic membrane



Janach J3740

Supporto rotativo per lama,
modello M. Campanelli

*Blade holder,
designed by M. Campanelli M.D.*

Janach J3713

Lama da Ø 13 mm per patch,
modello M. Campanelli

*Patch blade, Ø 13 mm,
designed by M. Campanelli M.D.*



Janach J4375

Supporto per lenticolo di membrana amniotica,
in silicone, sterilizzabile

*Silicone disc for amniotic membrane,
reusable*



Sivelli J2292

Ring per fissaggio del patch
di membrana amniotica

Patch fixation ring



Sivelli J3764

Pinza ad azione incrociata per
movimentazione e posizionamento
del patch di membrana amniotica

*Cross-action forceps for holding
and positioning the amniotic
membrane patch*



Janach J2935

Applanatore per lente a contatto post intervento

Post-operative contact lens applanator



Janach J3912

Pinza corneale, delicata, con 1x2 denti,
retti da 0.10 mm, con ppf, in titanio

*Corneal forceps, delicate, 1x2 straight,
0.10 mm teeth, with tying platform, titanium*



Vinciguerra J2112A

Spatola per depitelizzazione per PRK

Epithelium removal spatula, for PRK



Sistema di
Qualità Certificato

Certified
Quality System

UNI EN ISO 9001:2008

UNI CEI EN ISO 13485:2012

© Copyright:
Hermann Janach

e.janach®
www.janach.it

E. Janach S.r.l. Via Borgo Vico, 35 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031 574088 - fax +39 031 572055_international@janach.it

BRO.042.11/14.EN/IT